

# Praktikum moderne Physik

## Versuch

Jens Schäfer	<i>schaferjens92@gmail.com</i>
Jan van der Linden	<i>jan.vdlinden95@gmail.com</i>

Durchgeführt am: Datum



# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Theoretische Grundlagen</b>	<b>1</b>
1.1	Ziel des Experiments . . . . .	1
1.2	Black Lipid Membran Methode . . . . .	1
1.3	Gramicidin A . . . . .	2
1.4	Generierung der Membran . . . . .	2
1.5	Einzelkanal Messungen . . . . .	3
1.6	Multikanal Messungen . . . . .	3
1.7	Weitere Analysen . . . . .	3
<b>2</b>	<b>Versuchsablauf</b>	<b>5</b>
2.1	Lipid membrane preparation . . . . .	5
2.2	Measurement of single channels . . . . .	5
2.3	Measurement of multiple channels . . . . .	5
2.4	Further questions . . . . .	6
<b>3</b>	<b>Versuchsauswertung</b>	<b>7</b>

# 1. Theoretische Grundlagen

## 1.1 Ziel des Experiments

In diesem Experiment soll anhand eines Modells untersucht werden, wie ein Antibiotikum auf eine Zellmembran wirkt. Dazu wird ein Präparat einer Lipid Doppelmembran angefertigt und einem Antibiotikum (Gramicidin A) ausgesetzt. Durch das Antibiotikum werden Ionenkanäle in der Membran gebildet und somit Kationenfluss ermöglicht. Für eine Zelle bedeutet dies, dass ihr Potential zusammenbricht und sie stirbt.

Hier soll die Generierung einer solchen Membran beobachtet werden und das Entstehen sowie die Beschaffenheiten der Ionenkanäle näher untersucht werden.

## 1.2 Black Lipid Membran Methode

Bei der Black Lipid Membran Methode ist eine speziell geformte Küvette aus PTFE Herzstück des Aufbaus. Zwei Tanks werden durch eine Trennwand abgeschirmt die eine kleine, kreisrunde Öffnung mit abgerundeten, weichen Kanten beinhaltet. Eine Wand der Küvette beinhaltet ein Fenster wodurch die Öffnung beobachtet werden kann. In dieser Öffnung werden die Peptide aufgetragen. Sie bilden einen geschlossenen, zunächst undurchdringlichen Film. Die beiden Tanks werden mit Elektrolyten gefüllt und Ag/AgCl-Elektroden ausgestattet. Durch die Zerstörung der Lipidschicht kann nun ein elektrischer Strom die Barriere überwinden und gemessen werden 1.1.

Die Natur der Lipide gibt vor, dass sie sich innerhalb einer Grenzschicht parallel anordnen.

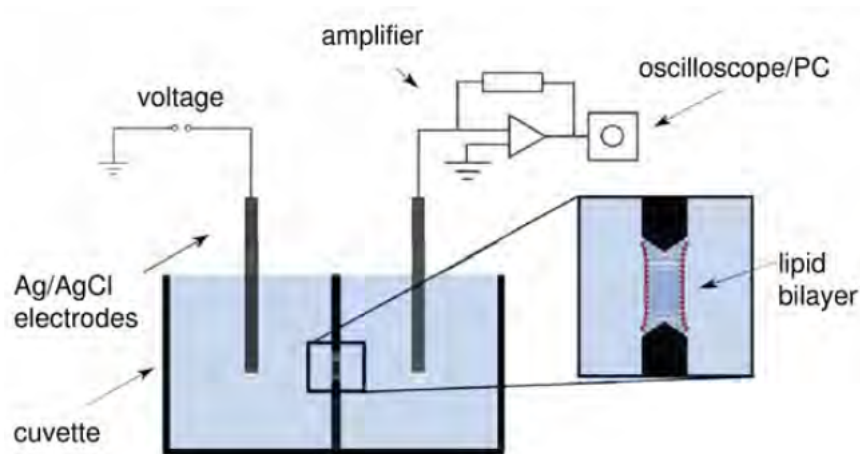


Abbildung 1.1: Experimenteller Aufbau

Dabei zeigen in wässriger Lösung die hydrophilen Köpfe nach außen, nach innen gerichtet

sind die hydrophoben Fettsäureketten, die sich mit den Fettsäuren der gegenüberliegenden Grenzschicht anziehen. So bauen die Lipide eine Kette mit einer gewissen Oberflächenspannung auf und trennen die Tanks dicht ab 1.2. Die Dicke wird somit ziemlich gut konstant gehalten und die Doppelschicht besitzt isolierende Eigenschaften. Daher kann man die Trennlinie in guter Näherung als Plattenkondensator ansehen.

Die Dicke der Leptidschicht kann anhand ihrer optischen Eigenschaften eingeordnet werden.

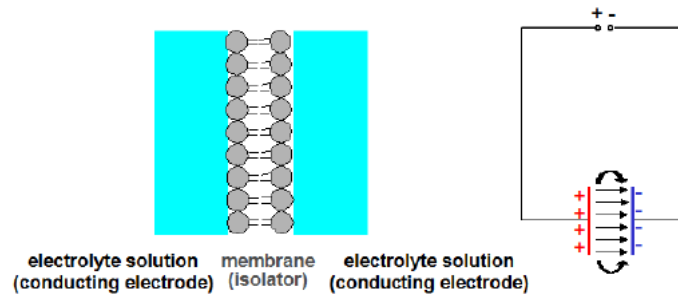


Abbildung 1.2: Lipid-Doppelschicht

Eine weiße Schicht hat eine Dicke  $d$  gegenüber der Wellenlänge  $\lambda \ll d$ , bei  $\lambda \approx d$  zeichnen sich newtonsche Ringe ab und für  $\lambda \gg d$  erscheint die Oberfläche schwarz. Die Membran wird bei sehr geringer Dicke bevorzugt untersucht um die Kondensatornäherung bestmöglich zu erfüllen, daher der auch die Namensgebung.

### 1.3 Gramicidin A

Gramicidin A ist ein Peptid-Antibiotikum. Diese bestehen in der Regel aus 10 bis 50 Aminosäuren und können mit Zellmembranen interagieren.

Im Körper werden Peptid-Antibiotika selbst generiert und werden benutzt, um infizierte Zellen zu zerstören. Um dies zu bewerkstelligen integrieren sie sich in die Zellmembran und ermöglichen es somit auf verschiedenen Wegen, Ionen in die Zelle einzudringen. Bei Gramicidin A geschieht dies durch die Bildung von Kanälen in der Membran. Diese haben Durchmesser von etwa  $3 - 4 \text{ \AA}$ . Durch den Fluss von Kationen in die Zelle wird damit ihr elektrochemisches Gleichgewicht gestört und sie stirbt ab.

In diesem Experiment wird die Penetration der Zelle durch die Lipid Doppelmembran simuliert; nachdem sich die Membran gebildet hat, ist kein Stromfluss mehr durch die Elektroden möglich. Nach Zugabe von Gramicidin A können in der Membran Kanäle gebildet werden, welche Stromfluss ermöglichen. Dies ist gleichbedeutend mit einer erfolgreichen Bekämpfung und Zerstörung einer infizierten Zelle im Körper mittels eines Peptid-Antibiotikums.

### 1.4 Generierung der Membran

Als erster Versuchsschritt soll eine Membran generiert werden. Dazu wird eine geringe Menge an Glycerol Monooleat in Tetradecan auf die Öffnung gebracht. Dadurch wird eine Lipide Doppelmembran generiert. Dies soll optisch beobachtet werden; die Farbe der Membran verändert sich, je nach Dicke bis sie komplett schwarz wird.

Für die fertige Membran kann die Leitfähigkeit sowie die Kapazität und die Dicke bestimmt werden.

Die Leitfähigkeit  $G$  kann über den gemessenen Strom durch die Membran und die angelegte Spannung bestimmt werden über  $G = \frac{I}{U}$ .

Um die Kapazität zu bestimmen kann angenommen werden, dass die Doppelmembran sich

im Stromkreislauf wie ein Plattenkondensator verhält. Daher ist der übliche Zusammenhang für einen Plattenkondensator gültig:

$$C = e_0 e_m \frac{A}{d} \quad (1.1)$$

### 1.5 Einzelkanal Messungen

Gibt man nur sehr geringe Mengen Gramicidin A in die Lösung so bilden sich auch nur sehr wenige Kanäle in der Membran. Dies wird durch einen quantisierten Stromverlauf sichtbar womit die Anzahl der aktiven Kanäle und auch der Stromfluss pro Kanal bestimmbar sind. Ebenso kann durch die Aufnahme eines Stromhistogramms die Lebensdauer eines Kanals bestimmt werden.

Desweiteren gilt zu überprüfen, ob das Ohmsche Gesetz hier erfüllt ist:

$$I_M = \lambda_M \cdot V_M$$

mit  $I_M$  dem Strom und  $\lambda_M$  der Leitfähigkeit durch die Membran, sowie  $V_M$  die Potentialdifferenz der beiden Elektrolyte auf beiden Seiten der Membran.

### 1.6 Multikanal Messungen

Erhöht man die Konzentration des Gramicidin A so öffnen und schließen sich viel mehr Kanäle und eine Vermessung der einzelnen Kanäle ist nicht mehr möglich. Jedoch besteht die Möglichkeit Aussagen über das Öffnen und Schließen der Kanäle, also die Lebenszeit durch eine Autokorrelationsfunktion zu treffen.

Dazu soll ein Stromhistogramm aufgenommen werden und über Autokorrelation verglichen werden. Dazu verschiebt man den Verlauf des Histogramms in der Zeit und berechnet die Korrelation des verschobenen Verlaufs mit dem ursprünglichen Verlauf. Ein hoher Korrelationswert deutet auf eine, sich wiederholende Struktur hin, woraus die Halbwertszeit bestimmt werden kann.

### 1.7 Weitere Analysen



## 2. Versuchsablauf

Der Versuchsablauf orientiert sich an der Lösung der im BLM-Dokument unter “2. Questions and to dos“ aufgelisteten Fragestellungen

### 2.1 Lipid membrane preparation

Preparation einer Lipid-Doppelschicht mit Glycerol-monooleate in Tetradecelektrische und optische darstellung der Lipid-Doppelschicht

Bestimmen der Membrankapazität, der spezifischen Membrankapazität und der Membrandicke

Bestimmen des Membranwiderstandes

Bestimmen der Schwellspannung und des maximalen E-Feldes

### 2.2 Measurement of single channels

Ändern der Leitfähigkeit für Gleichstrom mittels kleiner Gramacidin A-konzentrationen

Bestimmen des Stromes und der mittleren Lebensdauer eines Channels mittels des Stromhistogrammes

Überprüfen des ohmschen Gesetzes mit einem einzelnen Channel

### 2.3 Measurement of multiple channels

Darstellen der Channelformierung mit einer hohen Gramacidin A-konzentration

Bestimmen des Stromes eines einzelnen Channels mittels des Stromhistogrammes

Bestimmen des Stromes eines einzelnen Channels und der mittleren Öffnungsdauer eines Channels mittels der analyse der autokorrelationsfunktion des Stromrauschens



## 2.4 Further questions

Gegenüberstellen der verschiedenen methoden und der Resultate

den check ich nich

Darstellen der Leitfähigkeit einzelner Channels von Gramicidin A kanälen

Berechnung des Partikelflusses (=Ionen/Sekunde) durch einen Gramicidin A-kanal

### **3. Versuchsauswertung**